



MÉRŐRENDSZER GRINDCONTROL

SEE WHAT OTHERS CAN'T SEE

Modern laboratory applications demand maximum control, highest reproducibility, and complete process transparency. The latest generation of GrindControl provides a solution that consistently meets these requirements — powerful, intelligent, and intuitive to operate.

GrindControl is used in ball mill processes and continuously records pressure and temperature inside the grinding jar. The system consists of a hardware measuring unit and dedicated analysis software, enabling real-time visualization and evaluation of the key process parameters, pressure and temperature.

This makes sample preparation more efficient, protects temperature-sensitive materials, and ensures stable conditions even in demanding applications — for example in mechanochemical syntheses. GrindControl creates transparency in the ball milling process and forms the foundation for reliable and reproducible results.



[Kattintson ide a videó letöltéséhez!](#)

A GRINDCONTROL ÁTTEKINTÉSE

- | Pontos hőmérséklet-figyelés –20 °C és +100 °C között, 0,1 °C felbontással.
- | Pontos belső edénynyomás-mérés 0 és 5 bar között, 1 mbar felbontással.
- | A gázok egyszerű bevezetése vagy kiengedése a speciális beömlő/kimeneti szelepeken keresztül.
- | Intuitív, valós idejű szoftver az összes adat figyelemmel kíséréséhez, rögzítéséhez és elemzéséhez.



ELŐNYÖK A TECHNOLÓGIA RÉVÉN

- | Teljesen önálló rendszer – nincs szükség a malom átalakítására.
- | Moduláris fedél kialakítás a különböző edényanyagok és méretek közötti gyors váltáshoz.
- | Legfeljebb négy GrindControl egység egyidejű figyelése.
- | Megbízható vezeték nélküli átvitel akár 5 méter távolságig és akár 80 óra akkumulátor-élettartam.
- | Fast and easy operation and cleaning: tools included.

GRINDCONTROL

A HŐMÉRSÉKLET ÉS A NYOMÁS MÉRÉSÉNEK ELŐNYEI

Monitoring temperature and pressure provides significant advantages for optimally designing and controlling ball mill processes for particle size reduction, sample preparation, and research applications.

Segít javítani:

Minőség: Pressure and temperature monitoring for reliable and reproducible results.

Hatékonyág: Real-time monitoring enables precise control of process conditions. Process parameters such as cooling, frequency, duration, and grinding pause intervals can be adjusted as needed.

Biztonság: Critical changes in pressure and temperature can be detected at an early stage, preventing process errors and safety risks.

Research & development: Deeper insights into mechanochemical reactions can be obtained. The relationship between the results and the relevant state variables can be analyzed.

A GrindControl rendszer a Planetary Ball Mills, a Mixer mills MM 500 nano/control és az Emax készülékekhez érhető el. Tartalmazza a nyomás és hőmérséklet méréséhez szükséges hardvert, valamint az elemző szoftvert.



ANALYSIS OF PRESSURE AND TEMPERATURE DEVELOPMENT DURING BALL MILLING




GrindControl supports a broad range of applications, delivering enhanced safety and accurate temperature regulation for controlled and reproducible ball milling.

EXAMPLE 1: MAXIMUM SAFETY DURING WET GRINDING

During ball milling, temperature and pressure profiles can develop differently depending on the filling level of the grinding jar, the jar material, and the process parameters.

While temperature and pressure increase gradually during the wet grinding of corundum in a 250 ml grinding jar in a planetary ball mill (left diagram), a significantly stronger increase is observed at the same rotational speed in a 500 ml grinding jar with steel balls of larger diameter (right diagram).

By continuously monitoring these state variables

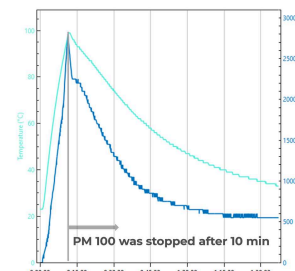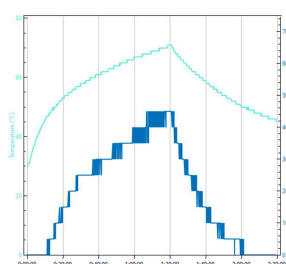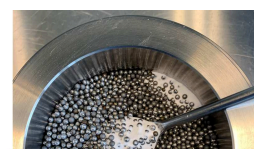

with GrindControl, the process can be specifically controlled and overall operational safety can be enhanced. Grinding jars with elevated temperatures must only be handled with protective gloves. Pressurized grinding jars may only be opened with extreme caution.



In addition, GrindControl enables the optimal selection of grinding and pause times, particularly for long-term grinding processes.

EXAMPLE 2: GENTLE BALL MILLING OF TEMPERATURE-SENSITIVE SAMPLES

When grinding temperature-sensitive materials, temperature control plays a crucial role. For such samples, targeted cooling or grinding pauses are often applied to protect sensitive substances from thermal damage. This is particularly advantageous when processing food products, organic samples, or during cell disruption, as it prevents the loss or denaturation of temperature-sensitive components.

In this example, the system is operated with the MM 500 control, which is connected to an external chiller. Using GrindControl, the process parameters inside the grinding chamber are continuously monitored. As illustrated, the grinding chamber is pre-cooled to below 10 °C and remains below room temperature throughout the entire process.

Continuous temperature monitoring with GrindControl enables precise process control, ensures reproducible results, and simultaneously protects sensitive materials.

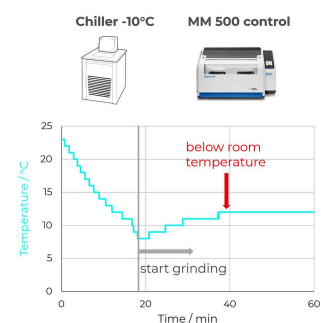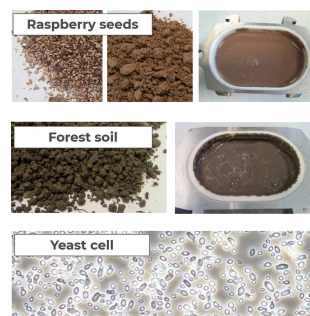


SYSTEMATIC ANALYSIS OF PARAMETERS AFFECTING MECHANOCHEMICAL REACTIONS

A nyomás és a hőmérséklet figyelemmel kísérése értékes információkat nyújt arról, hogy mi történik az őrlődény belsejében. A GrindControl széles körben használatos anyagszintézisek, például mechanikus ötvözés és egyéb mechanokémiai reakciók vizsgálatára.

1. PÉLDA: ÖNGYULLADÓ MECHANOKÉMIAI SZINTÉZISREAKCIÓ (MSR) MONITOROZÁSA



Mechanokémiai szintézist hajtottunk végre egy MM 500 nano készülékben, egy 125 ml-es rozsdamentes acél edényben, GrindControl segítségével. A reagenseket és a 32 × 10 mm-es golyókat 20 Hz-es frekvencián, levegő alatt őrlöttük.

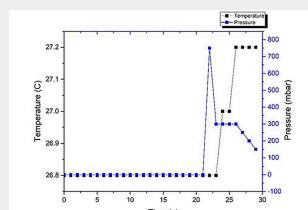

Körülbelül 20 másodpercnyi őrlés után gyulladás történt, ami nyomásemelkedéshez vezetett (kb. 730 mbar) és hőmérséklet-emelkedéshez. A GrindControl pontosan rögzítette a gyulladási pontot – ez a kulcsfontosságú paraméter ennek az önterjedő mechanokémiai szintézisreakciónak (MSR). [8]

EXAMPLE 2: MECHANOCHEMICAL ACTIVATION OF CLAYS FOR “GREEN CEMENT”

In research on sustainable cement, the GrindControl system supports the analysis of the mechanochemical activation of clay minerals. In this process, the pozzolanic reactivity can be significantly increased compared to untreated or calcined samples (see left figure). The activated clays serve as Supplementary Cementitious Materials (SCMs) and enable a reduction in CO₂ emissions by partially replacing clinker.

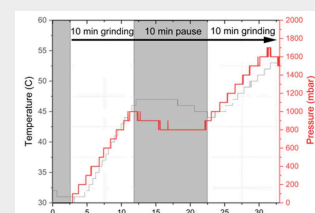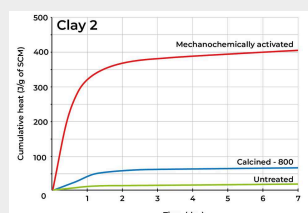

Processing is carried out in a PM 100 planetary ball mill at 500 rpm, using a 500 ml grinding jar with twelve 20 mm stainless steel balls (ball-to-powder ratio of 25:1). By linking pressure and temperature

data with reactivity measurements, the activation process can be specifically monitored and controlled. [9]


GRINDCONTROL APPLICATION AREAS



When processing temperature-sensitive materials, the temperature must be monitored precisely. With GrindControl, compliance with specified temperature limits can be reliably ensured.



During wet grinding processes, long grinding times and high energy input can lead to significant temperature increases and pressure build-up. GrindControl enhances operational safety during handling and enables the optimization of grinding and pause intervals.

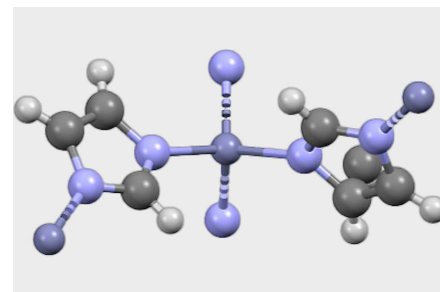

In mechanochemistry, specific temperature and pressure conditions are crucial. With GrindControl, these parameters can be precisely monitored and systematically correlated with the respective reaction outcomes.


GRINDCONTROL

GRINDCONTROL IN PRACTICE


The following videos provide a concise overview of the available versions, the system structure, and proper cleaning procedures.



[Kattintson ide a videó letöltéséhez!](#)

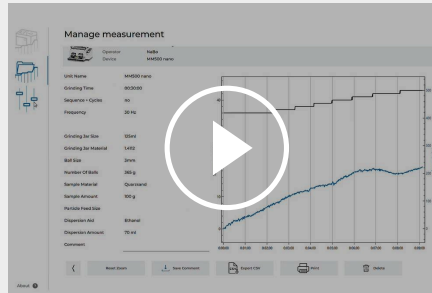

[Kattintson ide a videó letöltéséhez!](#)

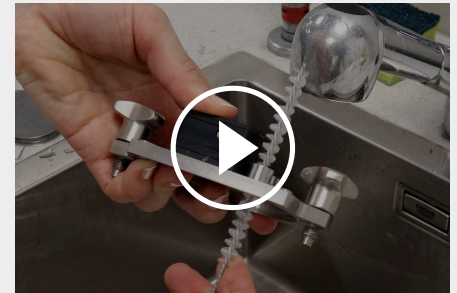

[Kattintson ide a videó letöltéséhez!](#)

HARDWARE

This video introduces the different available GrindControl versions and explains the respective hardware components. It also provides an overview of compatibility with various mill types and materials.

SOFTWARE

This video demonstrates how to use the software and explains its structure. It also clearly illustrates the acquisition and visualization of the measured data.

CLEANING

This video demonstrates the proper cleaning procedure for the GrindControl system after use. It provides important instructions on safe handling and the preservation of components to ensure long-term and reliable operation.

MŰKÖDÉSI ELV

Pressure and temperature are transmitted in real time via Bluetooth from the GrindControl electronics to a PC. The software records five measurements per second, generating a detailed log of the pressure and temperature profiles.

The sensors are integrated into the lid of the



grinding jar, capturing the physical conditions in a way that most accurately reflects the environment inside the jar.

Sintered filters reliably protect the sensors from contact with solid sample material. At the same time, they prevent material from escaping the grinding jar when the gas inlets are used.

The software is available free of charge and is supported from Windows 11 onward.

GRINDCONTROL

MŰSZAKI ADATOK

Feladat	pressure and temperature measuring for Planetary Ball Mills, Emax and Mixer Mills MM 500 nano/control
Alkalmazási terület	biológia, geológia / fémkohászat, gyógyászat / gyógyszergyártás, gépgyártás / elektronika, kémia / műanyagok, környezetvédelem / újrahasznosítás, material synthesis, mezőgazdaság, élelmiszer, építőanyagok, üveg / kerámia
Méréstartományok	gas pressure: 0 - 500 kPa (5 bar) temperature: -20°C - +100 °C
Száraz őrlés	igen
Nedves őrlés	igen
Kriogén őrlés	yes min. -20 °C
Őrlőedény típusa	Screw-Lock (MM) and EasyFit jars (PM)
Őrlőszerszámok anyaga	hardened stainless steel, cirkónium-oxid
Őrlőedények térfogatai	125 ml (MM); 50 - 500 ml (PM)
Transmission frequency	5 /s
Digitális csatlakozási helyek	
Elektromos hálózat feszültsége	battery (up to 80 h operation time)
Tartozékok	opening aid, cleaning tools, o-ring, Software download, sintered filter, (lid insert not included)
Súly, netto	lid with sensor unit 360 g (MM) 1780 g / 1140 g (PM)
Szabványok	CE
Technical requirements	PC with Windows 11 and Bluetooth 5.0 or higher
Software	live monitoring of measurement data, full measurement protocol, storable templates, list of performed measurements, data export in .pdf and .csv

MM = Mixer Mill; PM = Planetary Ball Mill | The GrindControl for the planetary ball mills is only compatible with the EasyFit grinding jars. Grinding jars "comfort" have other dimensions and are not compatible.

HIVATKOZÁSOK

[8] Reaction scheme and performance of the experiments: Dr. Matej Balaz, Institute of Geotechnics, Slovak Academy of Sciences (SAS).

[9]: Department of Architecture & Civil Engineering, Centre for Climate Adaptation & Environment Research, University of Bath

www.retsched.com/grindcontrol

RENDELÉSI ADATOK

PRESSURE AND TEMPERATURE MEASURING SYSTEM GRINDCONTROL FOR MIXER MILLS

**incl. sensors and transmitter unit, case, opening aid and cleaning accessories for MM 500 control / nano / Emax
(please order lid insert and grinding jar separately)**

22.782.0032	GrindControl for MM 500 control/nano/Emax grinding jar 125 ml
03.474.0242	GrindControl lid insert for MM 500 control/nano and Emax grinding jar 125 ml, stainless steel
03.474.0245	GrindControl lid insert for MM 500 control/nano and Emax grinding jar 125 ml, zirconium oxide

ACCESSORIES FOR MM 500 CONTROL/NANO GRINDCONTROL

05.114.0122		O-ring for 125 ml grinding jars (MM 500 control/nano and Emax)
22.186.0007		Sintered filter with O-ring, set of 10 pieces
22.864.0001		Valve set M8x1 for GrindControl and aeration lids

PRESSURE AND TEMPERATURE MEASURING SYSTEM GRINDCONTROL FOR PLANETARY BALL MILLS

**incl. sensors and transmitter unit, insert of lid, software, case, opening aid and cleaning accessories for PM
(please order grinding jars separately)**

22.782.0033		GrindControl for PM grinding jar EasyFit 50 - 125 ml
22.782.0034		GrindControl for PM grinding jar EasyFit 250 - 500 ml

GRINDCONTROL LID INSERTS

03.474.0243	GrindControl lid insert for 50, 80, 125 ml, stainless steel
03.474.0246	GrindControl lid insert for 50, 80, 125 ml, zirconium oxide

03.474.0244	GrindControl lid insert for 250 or 500 ml, stainless steel
03.474.0247	GrindControl lid insert for 250 or 500 ml, zirconium oxide

ACCESSORIES FOR PM GRINDCONTROL WITH GRINDING JARS EASYFIT

05.114.0056		O-ring for 50, 80 or 125 ml
05.114.0054		O-ring for 250 ml - 500 ml grinding jars EasyFit (PM)
03.111.0438		Flat gasket for 50 ml, 80 ml or 125 ml
03.111.0439		Flat gasket for 250 ml - 500 ml
22.186.0007		Sintered filter with O-ring, set of 10 pieces
22.864.0001		Valve set M8x1 for GrindControl and aeration lids