



## ПРОСЕИВАЮЩАЯ МАШИНА AS 200 BASIC

Аналитические просеивающие машины серии AS 200 используются для исследований и разработки, контроля качества сырья и готовой продукции, а также в контроле производственной деятельности. Управляемый электромагнитный привод гарантирует оптимальную адаптацию к каждому веществу. Фракции с узким распределением по размерам частиц могут быть получены даже при очень коротких временах отсева. AS 200 basic это бюджетная модель линейки просеивающих машин, обладающая привычным качеством и надежностью приборов RETSCH. Она имеет электронное задание амплитуды и времени отсева.

## ТОЧНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- | НОВИНКА: электронная установка амплитуды и времени
- | Подходит для сухого и мокрого отсева
- | Отличная эффективность анализа даже с небольшими временами отсева
- | Эффективный электромагнитный привод
- | Трехмерное движение распределяет материал равномерно по всей поверхности сит, что гарантирует оптимальное использование ситовой поверхности и приводит к более быстрому и воспроизводимому отсева
- | Высота ситовой колонны до 510 мм
- | Свободное задание всех параметров отсева (амплитуда, время)
- | Возможность работы с зажимными устройствами типа "comfort"
- | Возможность использования ПО EasySieve для расчета результатов отсева
- | Не требует технического обслуживания
- | Простота эксплуатации, эргономичный дизайн

## МОКРЫЙ РАССЕВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИБРАЦИОННЫХ ПРОСЕИВАЮЩИХ МАШИН

В некоторых случаях мокрый рассев является единственным решением, например, если проба представляет собой суспензию или когда необходимо просеять очень тонкий порошок (<45 мкм), который имеет склонность к агломерации. Все вибрационные просеивающие машины RETSCH подходят для проведения мокрого отсева. Доступны специальные аксессуары, такие как зажимные крышки с распылительной насадкой и поддоны с выпуском, а также промежуточные кольца, позволяющие отводить излишек воздуха без каких-либо потерь жидкости и пробы.



ПРОСЕИВАЮЩАЯ МАШИНА AS 200 BASIC

## АКСЕССУАРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

RETSCH sieve shakers can be equipped with a variety of accessories to meet a wide range of application requirements.



### Зажимные устройства

Зажимные устройства RETSCH обеспечивают безопасное, быстрое и удобное крепление сит в просеивающей машине. Зажимные устройства типа **comfort** отличаются исключительным удобством и быстрой фиксацией.

### Аксессуары для контрольных сит

Поддоны, промежуточные поддоны, промежуточные кольца и крышки для сит.

### Аксессуары для мокрого отсева

Зажимные устройства с встроенной распылительной насадкой, поддоны с выпуском, вентиляционные кольца.

### Приспособления для повышения эффективности отсева

Кольца, щётки, кубики, шарики (например, для предотвращения засорения сит и агломерации частиц размером частиц <100 мкм).

### Прободелители

Точных и достоверных результатов можно достигнуть, только если проба является представительной и отражает свойства всего материала. **Прободелители RETSCH** предназначены для отбора представительных проб для обеспечения воспроизводимости результатов анализа.

### Ультразвуковые ванны и сушильные аппараты

Предназначены для эффективной очистки контрольных сит, а также быстрой и бережной сушки сит и проб и сит.

## EASYSIEVE / EASYSIEVE CFR ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

EasySieve, программное обеспечение для анализа размера частиц, по многим параметрам превосходит ручную оценку. Программное обеспечение способно автоматически контролировать необходимые процедуры измерения и взвешивания - от регистрации веса сита до оценки данных. Оно просто и удобно в использовании, а также доступно в версии, соответствующей требованиям FDA 21 CFR Part 11.




## ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

RETSCH's vibratory sieve shakers are ideally suited for separation, fractioning and particle size determination of cement clinker, chemicals, coffee, construction materials, fertilizers, fillers, flours, grains, metals powders, minerals, nuts, plastics, sand, seeds, soils and washing powder.



*удобрения*

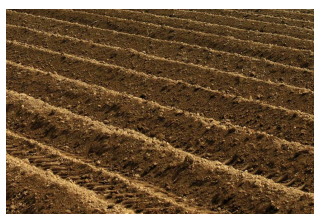

*почва*



*злаки*



*стройматериалы*

Чтобы найти наилучшее решение для Ваших задач пробоподготовки, воспользуйтесь нашей базой данных по применениям

## ПРИНЦИП РАБОТЫ

Все ситовые машины серии AS200 работают на запатентованном RETSCH электромагнитном приводе (EP 0642844). Этот привод создает трехмерное движение, комбинацию вертикальных колебаний и вращения в горизонтальной плоскости, что позволяет просеиваемому материалу равномерно распределяться по всей поверхности сит. Преимуществом являются: высокая нагрузка, особенно плавная работа и короткие времена отсева при высокой эффективности разделения.



[Смотреть видео](#)

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Применения</b>                        | разделение, фракционирование, определение размеров частиц                                                                                                                                                                          |
| <b>Область применения</b>                | биология, геология / металлургия, машиностроение / электроника, медицина / фармацевтика, окружающая среда / переработка, пищевая промышленность, сельское хозяйство, стекло / керамика, строительные материалы, химия / пластмассы |
| <b>Исходный материал</b>                 | порошки, сыпучие материалы, суспензии                                                                                                                                                                                              |
| <b>Диапазон измерений*</b>               | 20 мкм - 25 мм                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Движение материала</b>                | трехмерный рассев - вертикальное движение с угловым моментом                                                                                                                                                                       |
| <b>Максимальное количество материала</b> | 3 кг                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Максимальное кол-во фракций</b>       | 9 / 17                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Максимальная масса комплекта сит</b>  | 4 кг                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Задание амплитуды</b>                 | цифровое, 1 - 100% (0 - 3 мм)                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Контроль амплитуды</b>                | -                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Дисплей времени</b>                   | цифровой, 1 - 99 мин                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Возможность сухого отсева</b>         | да                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Возможность мокрого отсева</b>        | да                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>USB-интерфейс</b>                     | -                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Возможность калибровки</b>            | -                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Диаметр сит</b>                       | 100 mm / 200 mm / 203 mm (8")                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Макс. высота колонны сит</b>          | 510 мм                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Зажимные устройства</b>               | standard, "comfort", each for wet and dry sieving                                                                                                                                                                                  |
| <b>Степень защиты</b>                    | IP 21                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Электропитание</b>                    | различные напряжения                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Тип электросети</b>                   | 1-фазная                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ш x В x Д</b>                         | 417 x 212 x 384 мм                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Вес нетто</b>                         | ~ 35 кг                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Стандарты</b>                         | CE                                                                                                                                                                                                                                 |

\*в зависимости от исходного материала, конфигурации и настроек прибора

[www.retsch.com/as200basic](http://www.retsch.com/as200basic)

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

### ПРОСЕИВАЮЩИЕ МАШИНЫ AS 200

**Просеивающие машины AS 200 для контрольных сит диаметром до 203 мм / 8" Ø - (заказывайте, пожалуйста, отдельно зажимное устройство, контрольные сита и поддон)**

30.030.0001



AS 200 basic

230 В, 50 Гц

**исполнения для других электрических сетей доступны по такой же цене**

### ЗАЖИМНЫЕ УСТРОЙСТВА AS 200

**макс. количество фракций, для контрольных сит Ø**

32.662.0002



Зажимное устройство "стандарт", 9 / 17, 200 / 203 мм Ø

32.662.0001



Зажимное устройство "comfort", 9 / 17, 200 / 203 мм Ø

32.662.0005



Универсальное зажимное устройство "standard", 9 / 17, 100 – 203 мм Ø

32.662.0004



Универсальное зажимное устройство "comfort", 9 / 17, 100 – 203 мм Ø

32.662.0007



Зажимное устройство универсальное для мокрого рассева "standard", 9 / 17, 100 – 203 мм Ø

32.662.0006



Зажимное устройство универсальное для мокрого рассева "comfort", 9 / 17, 100 – 203 мм Ø

### НАБОР СИТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ AS 200

60.131.000999



Набор из 8 сит 200x50мм DIN ISO 3310-1 (45 мкм, 63 мкм, 125 мкм, 250 мкм, 500 мкм, 1 мм, 2 мм, 4 мм и поддон)

60.150.000999



Набор из 6 сит 8"x2" (203x50мм) ASTM E 11 (230меш, 120меш, 60меш, 35меш, 18меш, 10меш, поддон)

### ПРИНАДЛЕЖНОСТИ AS 200

02.938.0001  Добавочный вес 2100 г (два диска) для маленькой загрузки для AS 200 basic / digit

03.243.0044  Резиновая подкладка для ситовой колонны к машинам

99.200.0037 Комплект IQ/OQ документации для AS 200 basic

**[LL:iid.retschi.link\_test\_sieve\_range]**

32.481.0022  Крышка для зажимов "comfort" и "standard" с большим окном из Perspex для сит 200/203 мм

32.481.0014  Крышка для универсальных зажимов "comfort" и "ecomomy" с малым окном из Perspex для сит 100/150/200/203 мм

32.481.0015  Крышка для мокрого рассева универсальная с малым окном из Perspex для сит 100/150/200/203 мм

**ЗАЖИМНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ**

32.142.0001  Clamping nuts, (2 pieces) for clamping device "standard"

32.737.0001  Быстрозажимные элементы для зажимных устройств "comfort" машин AS 200/300/400 (2 шт.)

05.114.0061 Уплотнительное кольцо для быстросъемных зажимных элементов для AS 200, 1 штука

**ШТАНГИ**

32.248.0002  Threaded rods, (2 pieces) for clamping device "standard"

32.248.0001  Threaded rods, short, (2 pieces) for clamping of max. 5 test sieves for clamping device "standard"

32.742.0009  Гладкие штанги для зажимного устройства "comfort" AS 200 (2 штуки)

32.742.0011  Штанги короткие гладкие на 5 сит для зажима "comfort" AS 200

**ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РАССЕВА**

32.365.0001 Цепочка для сит 200/203 мм



32.050.0001 Щетки из нейлона, 3 шт.



32.902.0001 Кубики из вулколлана, 12 x 12 x 12 mm, 10 штук



32.902.0002 Кубики из вулколлана, 20 x 20 x 20 mm, 10 штук



32.354.0001 Шары резиновые, 20 мм Ø, 5 штук



32.354.0002 Шары из агата, 10 мм Ø, 10 штук



32.354.0004 Шары из стеатита, 6 mm Ø, 150 g

## СТОЙКА ДЛЯ СИТ

32.012.0001 Подставка для 10 сит 200 мм, высотой 50 мм/25 мм



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ СИТ (ПРИЕМНЫЕ СОСУДЫ, КОЛЬЦА, КРЫШКИ)

ДЛЯ СИТ ДИАМЕТРОМ 200 ММ, ВЫСОТА 50 ММ

|             |                                                                                     |                                          |                   |          |              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------|--------------|
| 69.720.0050 |  | Поддон для сит                           | нержавеющая сталь | 200 мм Ø | высота 50 мм |
| 69.220.0050 |  | Промежуточный поддон                     | нержавеющая сталь | 200 мм Ø | высота 50 мм |
| 69.121.0050 |  | Промежуточное кольцо                     | нержавеющая сталь | 200 мм Ø | высота 50 мм |
| 69.520.0051 |  | Крышка для сита                          | нержавеющая сталь | 200 мм Ø |              |
| 69.420.0050 |  | Поддон с выпуском                        | нержавеющая сталь | 200 мм Ø | высота 50 мм |
| 69.221.0025 |  | Вентиляционное кольцо для мокрого отсева | нержавеющая сталь | 200 мм Ø | высота 25 мм |

05.114.0174

Уплотнительное кольцо для  
сит

200 мм Ø

ДЛЯ СИТ ДИАМЕТРОМ 200 ММ, ВЫСОТА 25 ММ

69.720.0025



Поддон для сит, нержавеющая сталь, 200 мм Ø, высота 25 мм

69.220.0025



Промежуточный поддон, нержавеющая сталь, 200 мм Ø, высота 25 мм

69.121.0025



Промежуточное кольцо, нержавеющая сталь, 200 мм Ø, высота 25 мм

69.520.0051



Крышка для сита, нержавеющая сталь, 200 мм Ø,

69.420.0050



Поддон с выпуском, нержавеющая сталь, 200 мм Ø, высота 50 мм

69.221.0025



Вентиляционное кольцо для мокрого отсева, нержавеющая сталь, 200 мм Ø, высота 25 мм

05.114.0174

Уплотнительное кольцо для сит, , 200 мм Ø,

ДЛЯ СИТ ДИАМЕТРОМ 203 ММ / 8", ВЫСОТА 2"

69.720.3050



Поддон для сит, нержавеющая сталь, 8" Ø, высота 2"

69.220.3050



Промежуточный поддон, нержавеющая сталь, 8" Ø, высота 2"

69.121.3050



Промежуточное кольцо, нержавеющая сталь, 8" Ø, высота 2"

69.520.3051



Крышка для сита, нержавеющая сталь, 8" Ø,

69.420.3050



Поддон с выпуском, нержавеющая сталь, 8" Ø, высота 2"

69.221.3025



Вентиляционное кольцо для мокрого отсева, нержавеющая сталь, 8" Ø, высота 1"

05.114.0174

Уплотнительное кольцо для сит, , 8" Ø,

ДЛЯ СИТ ДИАМЕТРОМ 203 ММ / 8", ВЫСОТА 1"

|             |                                                                                   |                                                                              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 69.720.3025 |  | Поддон для сит, нержавеющая сталь, 8" Ø, высота 1"                           |
| 69.220.3025 |  | Промежуточный поддон, нержавеющая сталь, 8" Ø, высота 1"                     |
| 69.121.3025 |  | Промежуточное кольцо, нержавеющая сталь, 8" Ø, высота 1"                     |
| 69.520.3051 |  | Крышка для сита, нержавеющая сталь, 8" Ø,                                    |
| 69.420.3050 |  | Поддон с выпуском, нержавеющая сталь, 8" Ø, высота 2"                        |
| 69.221.3025 |  | Вентиляционное кольцо для мокрого отсева, нержавеющая сталь, 8" Ø, высота 1" |
| 05.114.0174 |                                                                                   | Уплотнительное кольцо для сит, , 8" Ø,                                       |

ДЛЯ СИТ ДИАМЕТРОМ 100 ММ

|               |                                                                                     |                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 60.010.000100 |  | Поддон для сит, нержавеющая сталь, диаметр 100 мм, высота 40 мм       |
| 60.220.000100 |                                                                                     | Промежуточный поддон, нержавеющая сталь, диаметр 100 мм, высота 40 мм |
| 60.935.000100 |  | Промежуточное кольцо, нержавеющая сталь, диаметр 100 мм, высота 40 мм |
| 60.107.000100 |  | Крышка для сита, нержавеющая сталь, диаметр 100 мм,                   |
| 60.010.100100 |  | Поддон с выпуском, нержавеющая сталь, диаметр 100 мм, высота 40 мм    |
| 05.114.0045   |  | Уплотнительное кольцо для сит, , диаметр 100 мм,                      |

КОНТРОЛЬНЫЕ СИТА ДИАМЕТРОМ 200 ММ - 50 ММ ВЫСОТА - ISO 3310/1 - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ / ТКАНАЯ СЕТКА

|               | # мм   | # меш | Ø      | высота | стандарт   |
|---------------|--------|-------|--------|--------|------------|
| 60.131.000020 | 20 мкм | -     | 200 мм | 50 мм  | ISO 3310/1 |

|               |         |   |        |       |            |
|---------------|---------|---|--------|-------|------------|
| 60.131.000025 | 25 мкм  | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.000032 | 32 мкм  | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.000036 | 36 мкм  | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.000038 | 38 мкм  | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.000040 | 40 мкм  | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.000045 | 45 мкм  | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.000050 | 50 мкм  | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.000053 | 53 мкм  | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.000056 | 56 мкм  | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.000063 | 63 μm   | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.000071 | 71 мкм  | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.000075 | 75 мкм  | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.000080 | 80 мкм  | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.000090 | 90 мкм  | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.000100 | 100 мкм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.000106 | 106 мкм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.000112 | 112 мкм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.000125 | 125 мкм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.000140 | 140 мкм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.000150 | 150 мкм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.000160 | 160 мкм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.000180 | 180 мкм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.000200 | 200 мкм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.000212 | 212 мкм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.000224 | 224 мкм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.000250 | 250 мкм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.000280 | 280 мкм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.000300 | 300 мкм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.000315 | 315 мкм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.000355 | 355 мкм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.000400 | 400 мкм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |

|               |         |   |        |       |            |
|---------------|---------|---|--------|-------|------------|
| 60.131.000425 | 425 мкм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.000450 | 450 мкм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.000500 | 500 μm  | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.000560 | 560 мкм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.000600 | 600 мкм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.000630 | 630 мкм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.000710 | 710 мкм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.000800 | 800 мкм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.000850 | 850 мкм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.000900 | 900 мкм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.001000 | 1.00 мм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.001120 | 1.12 мм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.001180 | 1.18 мм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.001250 | 1.25 мм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.001400 | 1.40 мм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.001600 | 1.60 мм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.001700 | 1.70 мм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.001800 | 1.80 мм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.002000 | 2.00 мм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.002240 | 2.24 мм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.002360 | 2.36 мм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.002500 | 2.50 мм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.002800 | 2.80 мм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.003150 | 3.15 мм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.003350 | 3.35 мм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.003550 | 3.55 мм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.004000 | 4.00 мм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.004500 | 4.50 мм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.004750 | 4.75 мм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.005000 | 5.00 мм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.005600 | 5.60 мм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |

|               |          |   |        |       |            |
|---------------|----------|---|--------|-------|------------|
| 60.131.006300 | 6.30 мм  | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.006700 | 6.70 мм  | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.007100 | 7.10 мм  | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.008000 | 8.00 мм  | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.009000 | 9.00 мм  | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.009500 | 9.50 мм  | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.010000 | 10.00 мм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.011200 | 11.20 мм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.012500 | 12.50 мм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.013200 | 13.20 мм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.014000 | 14.00 мм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.016000 | 16.00 мм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.018000 | 18.00 мм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.019000 | 19.00 мм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.020000 | 20.00 мм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.022400 | 22.40 мм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.025000 | 25.00 мм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.026500 | 26.50 мм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.028000 | 28.00 мм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.031500 | 31.50 мм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.035500 | 35.50 мм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.037500 | 37.50 мм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.040000 | 40.00 мм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.045000 | 45.00 мм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.050000 | 50.00 мм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.053000 | 53.00 мм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.056000 | 56.00 мм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.063000 | 63.00 мм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.071000 | 71.00 мм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.075000 | 75.00 мм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.080000 | 80.00 мм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |

|               |           |   |        |       |            |
|---------------|-----------|---|--------|-------|------------|
| 60.131.090000 | 90.00 мм  | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.100000 | 100.00 мм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.106000 | 106.00 мм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.112000 | 112.00 мм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.131.125000 | 125.00 мм | - | 200 мм | 50 мм | ИСО 3310/1 |

## КОНТРОЛЬНЫЕ СИТА ДИАМЕТР 200 ММ - 25 ММ ВЫСОТА - ИСО 3310/1 - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ/ТКАНАЯ СЕТКА

|               | # мм    | # меш | Ø      | высота | стандарт   |
|---------------|---------|-------|--------|--------|------------|
| 60.122.000020 | 20 мкм  | -     | 200 мм | 25 мм  | ИСО 3310/1 |
| 60.122.000025 | 25 мкм  | -     | 200 мм | 25 мм  | ИСО 3310/1 |
| 60.122.000032 | 32 мкм  | -     | 200 мм | 25 мм  | ИСО 3310/1 |
| 60.122.000036 | 36 мкм  | -     | 200 мм | 25 мм  | ИСО 3310/1 |
| 60.122.000038 | 38 мкм  | -     | 200 мм | 25 мм  | ИСО 3310/1 |
| 60.122.000040 | 40 мкм  | -     | 200 мм | 25 мм  | ИСО 3310/1 |
| 60.122.000045 | 45 мкм  | -     | 200 мм | 25 мм  | ИСО 3310/1 |
| 60.122.000050 | 50 мкм  | -     | 200 мм | 25 мм  | ИСО 3310/1 |
| 60.122.000053 | 53 мкм  | -     | 200 мм | 25 мм  | ИСО 3310/1 |
| 60.122.000056 | 56 мкм  | -     | 200 мм | 25 мм  | ИСО 3310/1 |
| 60.122.000063 | 63 µm   | -     | 200 мм | 25 мм  | ИСО 3310/1 |
| 60.122.000071 | 71 мкм  | -     | 200 мм | 25 мм  | ИСО 3310/1 |
| 60.122.000075 | 75 мкм  | -     | 200 мм | 25 мм  | ИСО 3310/1 |
| 60.122.000080 | 80 мкм  | -     | 200 мм | 25 мм  | ИСО 3310/1 |
| 60.122.000090 | 90 мкм  | -     | 200 мм | 25 мм  | ИСО 3310/1 |
| 60.122.000100 | 100 мкм | -     | 200 мм | 25 мм  | ИСО 3310/1 |
| 60.122.000106 | 106 мкм | -     | 200 мм | 25 мм  | ИСО 3310/1 |
| 60.122.000112 | 112 мкм | -     | 200 мм | 25 мм  | ИСО 3310/1 |
| 60.122.000125 | 125 мкм | -     | 200 мм | 25 мм  | ИСО 3310/1 |
| 60.122.000140 | 140 мкм | -     | 200 мм | 25 мм  | ИСО 3310/1 |
| 60.122.000150 | 150 мкм | -     | 200 мм | 25 мм  | ИСО 3310/1 |
| 60.122.000160 | 160 мкм | -     | 200 мм | 25 мм  | ИСО 3310/1 |

|               |         |   |        |       |            |
|---------------|---------|---|--------|-------|------------|
| 60.122.000180 | 180 мкм | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.000200 | 200 мкм | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.000212 | 212 мкм | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.000224 | 224 мкм | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.000250 | 250 мкм | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.000280 | 280 мкм | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.000300 | 300 мкм | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.000315 | 315 мкм | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.000355 | 355 мкм | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.000400 | 400 мкм | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.000425 | 425 мкм | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.000450 | 450 мкм | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.000500 | 500 μm  | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.000560 | 560 мкм | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.000600 | 600 мкм | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.000630 | 630 мкм | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.000710 | 710 мкм | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.000800 | 800 мкм | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.000850 | 850 мкм | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.000900 | 900 мкм | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.001000 | 1.00 мм | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.001120 | 1.12 мм | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.001180 | 1.18 мм | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.001250 | 1.25 мм | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.001400 | 1.40 мм | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.001600 | 1.60 мм | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.001700 | 1.70 мм | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.001800 | 1.80 мм | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.002000 | 2.00 мм | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.002240 | 2.24 мм | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.002360 | 2.36 мм | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |

|               |          |   |        |       |            |
|---------------|----------|---|--------|-------|------------|
| 60.122.002500 | 2.50 мм  | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.002800 | 2.80 мм  | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.003150 | 3.15 мм  | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.003350 | 3.35 мм  | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.003550 | 3.55 мм  | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.004000 | 4.00 мм  | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.004500 | 4.50 мм  | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.004750 | 4.75 мм  | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.005000 | 5.00 мм  | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.005600 | 5.60 мм  | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.006300 | 6.30 мм  | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.006700 | 6.70 мм  | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.007100 | 7.10 мм  | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.008000 | 8.00 мм  | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.009000 | 9.00 мм  | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.009500 | 9.50 мм  | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.010000 | 10.00 мм | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.011200 | 11.20 мм | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.012500 | 12.50 мм | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.013200 | 13.20 мм | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.014000 | 14.00 мм | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.016000 | 16.00 мм | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.018000 | 18.00 мм | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.019000 | 19.00 мм | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.020000 | 20.00 мм | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.022400 | 22.40 мм | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.025000 | 25.00 мм | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.026500 | 26.50 мм | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.028000 | 28.00 мм | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.031500 | 31.50 мм | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.035500 | 35.50 мм | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |

|               |           |   |        |       |            |
|---------------|-----------|---|--------|-------|------------|
| 60.122.037500 | 37.50 мм  | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.040000 | 40.00 мм  | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.045000 | 45.00 мм  | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.050000 | 50.00 мм  | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.053000 | 53.00 мм  | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.056000 | 56.00 мм  | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.063000 | 63.00 мм  | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.071000 | 71.00 мм  | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.075000 | 75.00 мм  | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.080000 | 80.00 мм  | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.090000 | 90.00 мм  | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.100000 | 100.00 мм | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.106000 | 106.00 мм | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.112000 | 112.00 мм | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |
| 60.122.125000 | 125.00 мм | - | 200 мм | 25 мм | ИСО 3310/1 |