



MOARA TĂIETOARE SM 100

The budget-priced basic model

Morile tăietoare sunt prima alegere pentru măcinarea produselor moi, mediu-dure, dure, elastice, fibroase și amestecuri eterogene.

SM 100 este modelul de bază cu preț accesibil RETSCH. Este potrivită pentru măcinarea probelor care nu necesită forțe extrem de mari. Moara a fost special concepută pentru aplicații de rutină. Este ușor de utilizat și poate fi montată pe o masă solidă sau pe cadrul de bază opțional.



[Click pentru video](#)

PENTRU APLICAȚII DE RUTINĂ

- | Dimensiuni de alimentare < 60 x 80 mm
- | Finețe finală definită datorită sitelor cu dimensiuni ale ochiurilor cuprinse între 0,25 și 20 mm
- | Curățare rapidă și ușoară datorită suprafețelor netede și a rotorului cu fixare prin împingere
- | Colectare prin gravitație cu recipiente de diferite dimensiuni
- | Gamă largă de accesorii, inclusiv diverse buncăre, sisteme de colectare, rotoare și site
- | Cele mai înalte standarde de siguranță



MOARA TĂIETOARE SM 100

ACCESORII PENTRU PROCESE DE MĂCINARE SIGURE ȘI EFICIENTE

Modelul SM 100 poate fi echipat cu diferite rotoare, buncăre și site. Moara și accesoriile, inclusiv barele și plăcuțele tăietoare, sunt disponibile și în versiuni potrivite pentru măcinare fără contaminare cu metale grele.




ROTORI

Sunt disponibile un rotor cu secțiuni paralele și un rotor cu 6 discuri, fabricate din oțel inoxidabil sau oțel special pentru măcinare contaminare cu fără metale grele.



BUNCĂRE

SM 100 poate fi echipat fie cu buncărul universal, care este potrivit pentru majoritatea probelor, fie cu buncărul conceput special pentru probe lungi.

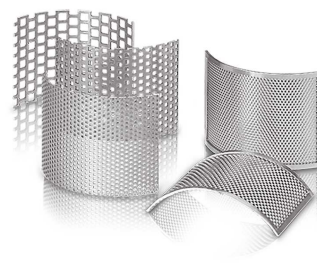


SITE

Sitele sunt fabricate din oțel inoxidabil și sunt disponibile cu ochiuri trapezoidale sau pătrate.

MOARA TĂIETOARE SM 100

PROBE TIPICE


Morile tăietoare RETSCH sunt potrivite pentru o gamă largă de aplicații. Printre materialele tipice care pot fi măcinate cu aceste mori enumerăm: preforme PET, zgură de aluminiu, furaje, oase, cabluri, cartoane, componente electronice, peleți furaje, folii, alimente, piele, amestecuri de materii, lignit, metale neferoase, hârtie, produse farmaceutice, materiale vegetale, jucării din plastic, materiale plastice, polimeri, combustibili derivați, deșeuri combustibil alternativ, rășini, cauciuc, condimente, paie, textile, deșeuri, lemn, etc.

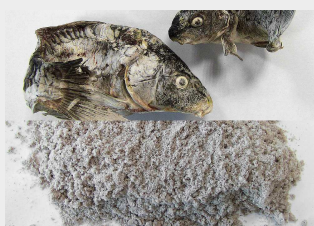

pește



lemn

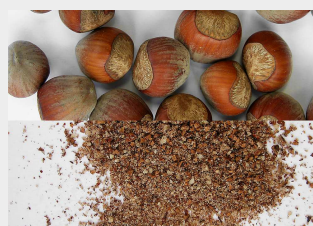

nuci



furaje

MOARA TĂIETOARE SM 100

PRINCIPIU DE FUNCȚIONARE

Măcinarea în moara tăietoare SM 100 are loc prin forțe de tăiere și forfecare. Proba intră în contact cu rotorul și este mărunțită între lamele și barele de tăiere standard montate în interiorul camerei de măcinare. Plăcile reversibile din metal dur dispuse în spirală pe rotorul cu 6 discuri acționează prin tăieri succesive. Cuțitele rotorului cu secțiuni paralele realizează măcinare cu o acțiune de tăiere specifică toporului. Timpul de staționare al probei în camera de măcinare este scurt; de îndată ce aceasta este suficient de mărunțită pentru a trece prin ochiurile sitei de la bază, proba este evacuată prin acțiunea forței gravitaționale și colectată în recipient. Viteza rotorului de 1.500 min^{-1} asigură o măcinare ușoară și rapidă.



[Click pentru video](#)

MOARA TĂIETOARE SM 100

DATE TEHNICE

Aplicabilitate	reducerea dimensiunii prin tăiere
Domenii în care se utilizează	agricultură, alimente, biologie, chimie/plastic, inginerie/ electronică, medicină/produse farmaceutice, mediu/reciclare
Material probă	soft, materiale semi-dure, elastic, friabros
Principiul de reducere a dimensiunii	forfecare, tăiere
Dimens. max. probă*	< 60 x 80 mm
Finețe finală*	0.25 - 20 mm
Viteza la 50 Hz (60 Hz)	1,500 min-1
Viteză periferică rotor	9.4 - 11.4 m/s
Diametru rotor	129.5 mm
Tipuri de rotor	Rotor secțiune paralelă / rotor 6 discuri
Tipuri de buncare de încărcare	universală, spectru larg
Material de construcție a elementelor de macinare	inox, oțel pentru necontaminare cu metale grele, carbura de wolfram
Dimensiuni ochiuri site	orificii trapezoidale 0,25 / 0,50 / 0,75 / 1,00 / 1,50 mm orificii pătrate 2,00 / 4,00 / 6,00 / 8,00 / 10,00 / 20,00 mm
Sisteme / capacități colector:	receptacul de 5 l de colectare / opțional: 30 l unitate de colectare 0.25 / 0.5 l
Antrenare	motor electric
Putere motor	1,5 kW
Alimentare electrică	230 V, 50 Hz
Conectare sursă de alimentare	trifazic
Grad de protecție	IP 54
W x H x D (închis)	582 x 1675 x 700 mm (cu suport cu roțile și buncăr universal)
Masa netă:	~ 73 kg fără buncăr de alimentare, rotor și suport
Standard	CE

* în funcție de materialul probei și configurația/setările instrumentului

www.retsch.com/sm100

INFORMAȚII DESPRE COMANDĂ

CUTTING MILL SM 100

Cutting Mill SM 100 complete with collecting receptacle, 5 litres
(please order rotor, hopper, bottom sieve and optional base frame separately)

20.727.0001		SM 100	3~ 400 V, 50 Hz
20.727.0009		SM 100	220–230 V, 50/60 Hz, with frequency converter
20.727.0002		 SM 100	3~ 400 V, 50 Hz, for grinding without heavy-metal contamination
20.727.0010		 SM 100	220–230 V, 50/60 Hz, with frequency converter, for grinding without heavy-metal contamination
22.824.0005		Base frame with wheels for SM 100	

other electrical versions available

ROTORS SM 100, SM 200, SM 300

22.608.0022		6-disc rotor, stainless steel, with reversible cutting tips of tungsten carbide	
22.608.0028		6-disc rotor, steel 1.0580, with reversible cutting tips of tungsten carbide, for grinding without heavy-metal contamination	
22.608.0021		Parallel section rotor, stainless steel	
22.608.0018		Parallel section rotor, steel 1.0580, for grinding without heavy-metal contamination	

HOPPERS

22.785.0007		Universal hopper with plastic plunger for SM 100	
22.408.0004		Long stock hopper with wooden plunger for SM 100	

ADDITIONAL PLUNGERS FOR UNIVERSAL HOPPER

22.725.0010		Plastic plunger
22.725.0011		Wooden plunger
22.725.0012		Aluminum plunger

BOTTOM SIEVES SM 100, SM 200, SM 300

BOTTOM SIEVES OF STAINLESS STEEL

03.647.0312		Găuri trapezoidale	0.25 mm
03.647.0313		Găuri trapezoidale	0.50 mm
03.647.0314		Găuri trapezoidale	0.75 mm
03.647.0315		Găuri trapezoidale	1.00 mm
03.647.0316		Găuri trapezoidale	1.50 mm
03.647.0317		Găuri trapezoidale	2.00 mm
03.647.0318		Găuri pătrate	2.00 mm
03.647.0319		Găuri pătrate	3.00 mm
03.647.0320		Găuri pătrate	4.00 mm
03.647.0321		Găuri pătrate	6.00 mm
03.647.0322		Găuri pătrate	8.00 mm
03.647.0024		Găuri pătrate	10.00 mm

03.647.0062



Găuri pătrate

20.00 mm

BOTTOM SIEVES OF STEEL 1.0353 FOR GRINDING WITHOUT HEAVY-METAL CONTAMINATION

03.647.0325



Găuri trapezoidale

0.25 mm

03.647.0326



Găuri trapezoidale

0.50 mm

03.647.0327



Găuri trapezoidale

0.75 mm

03.647.0328



Găuri trapezoidale

1.00 mm

03.647.0329

Găuri trapezoidale

1.50 mm

03.647.0331

Găuri pătrate

2.00 mm

03.647.0332

Găuri pătrate

3.00 mm

03.647.0333



Găuri pătrate

4.00 mm

03.647.0334

Găuri pătrate

6.00 mm

03.647.0335



Găuri pătrate

8.00 mm

03.647.0359



Găuri pătrate

10.00 mm

ACCESSORIES SM 100, SM 200, SM 300

COLLECTING RECEPTACLES

22.003.0008



Collecting unit 250 / 500 ml, incl. 2 sample bottles

22.523.0001



Sample bottles, 250 ml, 10 pieces

22.003.0007



Collecting receptacle, 5 litres, stainless steel

05.045.0528		Collecting receptacle, 30 litres
22.187.0006	 	Ring-type filter for collecting receptacle, 5 litres
22.748.0001		Dust filter clamping rings for ring-type filter, incl. 5 dust filters
22.524.0002	 	Dust filters for ring-type filter, 25 pcs.
22.187.0007		Filter hose for collecting receptacle, 5 litres, incl. holder

ACCESSORIES FOR ROTORS

22.908.0001		Reversible cutting tip incl. screws, tungsten carbide, for 6-disc rotor (10 pcs.)
22.151.0004		Cutting plates, stainless steel, for parallel section rotor, 1 set (3 pieces)
22.151.0006	 	Cutting plates, steel 1.1740, for parallel section rotor, 1 set (3 pieces) for grinding without heavy-metal contamination for grinding without heavy-metal contamination

STATIONARY CUTTING BARS

22.152.0007		Cutting bars, stainless steel, 1 set (3 pieces) for SM 100
22.152.0009	 	Cutting bars, steel 1.1740, 1 set (3 pieces) for SM 100 for grinding without heavy-metal contamination
22.608.0035		Adjustment aid for cutting bars

ADDITIONAL ITEMS SM 100, SM 200, SM 300

22.225.0002		Replacement extraction tool for rotor
22.111.0003		Gasket for door SM 100 / SM 200 / SM 300, 1 piece
99.200.0032		IQ/OQ Documentation for SM 100