



KJEFTEKNUSER BB 600

Largest feed size combined with highest throughput


The Jaw Crusher BB 600 is specifically designed for accepting large feed sizes up to 350 x 170 mm. The gap width can be set stepless from 6 - 60 mm. Depending on the sample material, particle sizes down to 6 mm can be obtained in one working run, resulting in an excellent crushing ratio of 25. A throughput of up to 3500 kg/h is possible with the BB 600.

The RETSCH jaw crusher series is available in 8 different sizes. Throughput and final fineness depend on the crusher type, selected gap width and breaking properties of the sample material.

Robust design, simple handling and cleaning are the features of the RETSCH jaw crusher models. Small amounts of sample are processed batchwise; for larger amounts the crushers can be operated continuously.

ROBUST & VERSATILE

- | Excellent crushing ratio
- | Continuous gap width setting
- | High throughput up to 3500 kg/h
- | Removable hopper with splash-back protection
- | Suitable for continuous and batchwise crushing

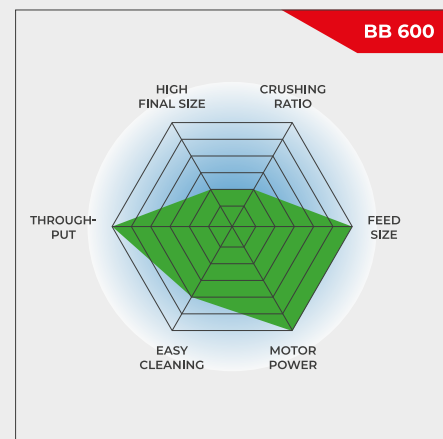

Largest feed size combined with highest throughput

KJEFTEKNUSER BB 600

SUPERIORITY IN DETAIL

The BB 600 achieves a throughput of up to 3,500 kg per hour. For batchwise processing, the jaw crusher is equipped with a 30 l collecting receptacle.

Further features like overload protection and a feed

hopper with splash-back protection make working with the BB 600 convenient and safe.

The breaking jaws for the BB 600 are sized 400 x 600 mm and are available in

- | manganese steel
- | steel for heavy-metal-free grinding
- | NiHard4 steel.



PROCESS-LINE VERSION

Due to the low installation height of 1 meter the BB 600 is ideally suited for continuous operation in automatic installations and sampling stations.

Thanks to the compact design of the BB 600 it may replace a jaw crusher in existing installations.



KJEFTEKNUSER BB 600

TYPICAL SAMPLE MATERIALS


RETSCH's powerful jaw crushers are ideally suited for preliminary crushing of construction materials, ores, granite, oxide ceramics, quartz, slag, silicon, coal, tungsten alloys, cement clinker, etc.



meteorite



sinter cake

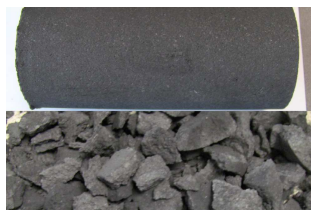

graphite electrode



sement drill core

To find the best solution for your sample preparation task, visit our application database.


KJEFTEKNUSER BB 600

VIRKEMÅTE

The Jaw Crusher BB 600 is a robust and powerful jaw crusher.

The feed material passes through the no-rebound hopper and enters the crushing chamber. Size reduction takes place in the wedge-shaped area between the fixed breaking jaw and the moveable breaking jaw driven by an eccentric drive shaft. The elliptical motion crushes the sample which then moves downwards under gravity.

On reaching the discharge gap width, it falls into a removable collector or, for continuous applications, on a conveyor belt, vibratory feeder or sampler.

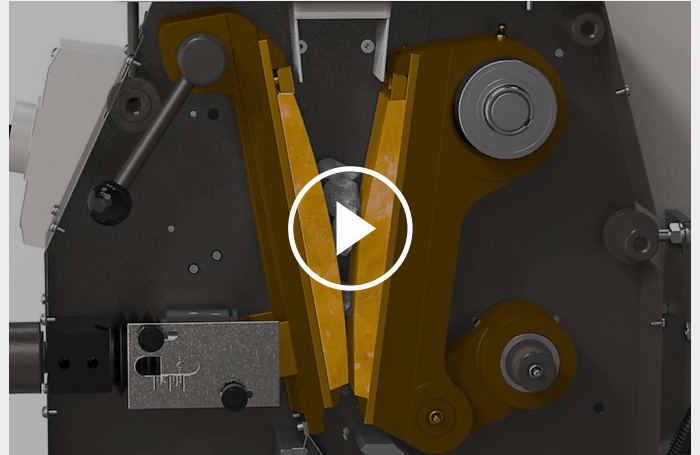

[Click to view video](#)

KJEFTEKNUSER BB 600

TECHNICAL DATA

funksjon	grov- og forknusing
bruksområde	byggematerialer, geologi / metallurgi, glass / keramikk, kjemi / plast, maskinbygging / elektroteknikk, miljø / gjenvinning
matemateriale	middels hardt, hardt, sprøtt, seigt
nedmalingsprinsipp	trykk
matestørrelse*	< 350 x 170 mm
sluttfinhet*	< 6 mm
Throughput	3500 kg/h
material i maleverktøyet	manganstål, stål for tungmetallfri nedmaling, NiHard4
kjeftvidde	400 x 240 mm
spalteåpning	6 - 60 mm with spacer plates
støvsuging:	-
sentralsmøring	-
monteringsversjon	valgfritt
opsamlingsbeholder	30 l
drift	trefasemotor
drivkraft	15 kW
Elektriske tilkoblingsdata	ulike spenninger
Nettilkobling	3-fase
kapslingstype	IP 55
b x h x d lukket	925 x 1600 x 1370 mm
nettovekt	~ 1350 kg
Normer / standarer	CE

*avhengig av matemateriale og apparatkonfigurerings-/apparatinnstillinger

[/bb600](#)

BESTILLINGSINFO

JAW CRUSHER BB 600

Jaw Crusher BB 600 complete with breaking jaws, wearing plates, feed hopper, collecting receptacle and base frame

				breaking jaws / wearing plates
21.004.0009		BB 600	3~ 400 V, 50 Hz	manganese steel / hardened steel
21.004.0013		BB 600	3~ 400 V, 50 Hz	NiHard 4 / hardened steel
21.004.0017		BB 600	3~ 400 V, 50 Hz	NiHard 4 / hardened steel

other electrical versions available for the same price

VERSION FOR INTEGRATION

Version for integration into a system at the customer's location, with manufacturer's declaration according to EC machine directive, with three-phase motor, without hopper, frame and protective motor switch

21.004.0006		BB 600	3/N~ 400 V, 50 Hz	manganese steel / hardened steel
-------------	---	--------	-------------------	----------------------------------

ACCESSORIES JAW CRUSHER BB 600

BREAKING JAWS BB 600

23.048.0032	Breaking jaws, manganese steel, 1 pair
23.048.0040	Breaking jaws, NiHard 4, 1 pair
23.048.0049	Breaking jaws, NiHard 4, waved, 1 pair
23.048.0039	Breaking jaws, heavy metal free steel, 1 pair

other materials available on request

WEARING PLATES BB 600

23.711.0024	Wearing plates, hardened steel, 1 pair
23.711.0028	Wearing plates, heavy metal free steel, 1 pair

other materials available on request

FURTHER ACCESSORIES BB 600

23.003.0030 Collecting receptacle, standard steel, powder coated, 30 litres